


**INSTRUCCIONES DE USO**  
**VANTELIN CODO DE APOYO**

**GUÍA DE TALLAS**

S: 7.5-9 in / 19-22 cm

M: 9-10 in / 22-25 cm

L: 10-11 in / 25-28 cm

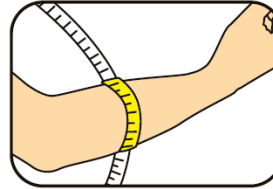

Mida alrededor del antebrazo como se muestra. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

**CARACTERÍSTICAS**

 <p>Inside Elbow</p>	<p><b>Estructura de taping en forma de X</b></p> <p>La estructura de taping en forma de X en el interior del codo limita el movimiento excesivo y reduce las molestias al levantar objetos pesados.</p>
 <p>Outside Elbow</p>	<p><b>Paneles de malla ventilados</b></p> <p>La estructura de malla de punto situada en la parte exterior del codo permite que la sujeción se adapte al movimiento del codo.</p>
	<p><b>Estructura de anclaje</b></p> <p>Bordes firmes y especialmente confeccionados sin costura que previenen el deslizamiento y estabilizan la estructura de taping en forma de X.</p>

## INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.


## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.Deslice el brazo dentro en el soporte del codo con la parte inferior de la “V” apuntando hacia abajo.
- 2.Coloque la malla de punto en forma de X en la parte interior del codo, con el centro de la X alineado con el pliegue del codo.

Estire la ortesis para que no se amontone al doblar ligeramente el codo.

- Use siempre directamente sobre la piel.
- En el caso que la codera no esté posicionada correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.

\*Las funciones que se obtienen con el uso de la codera pueden variar según cada persona.

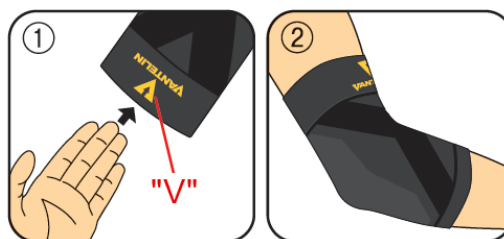

## ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor intenso debido a esguince, fractura o lesión de ligamentos, etc., (2) trastorno vascular periférico, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos textiles o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si experimenta síntomas como: sarpullido/enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilizar mientras duerme

## **INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Utilizar red de lavandería)**

1. Lavar por separado, por debajo de los 30°C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

## **PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN**

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

## **PRESENTACIÓN**

1 unidad

## **FABRICADO POR**

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN.

## **LUGAR DE FABRICACIÓN**

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan