

MANUAL ARAHAN

SOKONGAN Buku Lali VANTELIN COOL FIT (Biru Muda)

PANDUAN SAIZ (Saiz Kasut)

M: Wanita: 6.5 in ~ 8.5 in / 24cm ~ 26cm




Lelaki: 6in ~ 8in / 24cm ~ 26cm

L: Wanita: 8.5 in ~ 10.5 in / 26cm ~ 28cm

Lelaki: 8in ~ 10in / 26cm ~ 28cm

Jika muat dua saiz, pilih yang lebih besar.

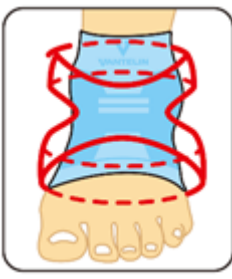FUNGSI

	<p>Struktur Pita Angka Lapan</p> <p>Mesh kait angka lipan diikat di bahagian buku lali dan kaki untuk memberi sokongan tambahan sendi apabila berjalan dan melakukan aktiviti harian.</p>
	<p>Struktur Pita Sokongan Lengkung Kaki</p> <p>Struktur pita sokongan lengkung kaki meningkatkan arka untuk membantu fungsi redaman, sekaligus mengurangkan keletihan.</p>
	<p>Struktur Anchor</p> <p>Pergelangan tanpa kelim atas dan bawah mencegah sokongan daripada tergelincir dan menstabilkan struktur pita angka lapan.</p>


INDIKASI

Digunakan untuk ketidakselesaan sendi setiap hari.

MANUAL ARAHAN

1. Masukkan kaki ke dalam pergelangan sokongan dengan bahagian bawah "V" menunjuk ke arah bawah.
2. Meletakkan struktur pita angka lapan sekitar pergelangan kaki dan lengkung kaki anda
3. Kemaskan pendakap supaya tiada lipatan terkumpul. Sentiasa memakai sokongan terus pada

kulit. Jika sokongan tidak diletakkan dengan betul, ia tidak dapat berfungsi seperti yang sepatutnya.

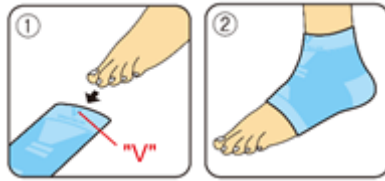

AMARAN

- Jangan gunakan jika anda: (1) terseliuh, patah atau kecederaan ligamen, (2) penyakit vaskular periferai, (3) kelainan seperti kecederaan, lebam, ruam di kawasan di mana sokongan dipakai, atau (4) dermatitis kronik/ alahan kepada kimia tekstil atau getah. Sekiranya anda mengalami sebarang simptom ini, hentikan penggunaan dengan serta-merta dan berunding dengan pembekal penjagaan kesihatan anda.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan.
- Gunakan saiz yang betul.
- Jangan gunakan ketika tidur.

ARAHAN PENJAGAAN

1. Cucian tangan berasingan di bawah suhu 40 °C.
2. Jangan gunakan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantungkan dan udara kering. Elakkan dari cahaya matahari langsung.
5. Seterika pada suhu rendah. Jangan menyeterika dengan stim.
6. Dilarang cucian kering.

Langkah waspada berkaitan penyimpanan and penggunaan

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Terdapat risiko produk terkoyak apabila memakai secara salah atau mengenakan daya yang kuat ke atasnya.

PEMBUNGKUSAN

Kotak 1 unit.

PEMILIK PRODUK

KOWA COMPANY, LTD

4-14, 3-chome, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8433, Jepun

DIBUAT OLEH

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Jepun