

MANUAL ARAHAN


SOKONGAN PERGELANGAN TANGAN VANTELIN

PANDUAN SAIZ

S: 5.5-6 in / 13-15 cm

M: 6-6.5 in / 15-17 cm

L: 6.5-7.5 in / 17-19 cm

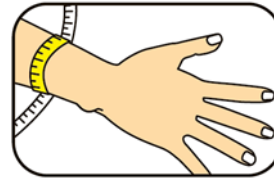

Ukur di lengan kira-kira 3 in / 7 cm di atas pergelangan tangan. Jika muat dua saiz, pilih yang lebih besar.

FUNGSI


	<p>Struktur Pita Sandwic</p> <p>Struktur pita sandwic di bahagian depan dan belakang pergelangan tangan berfungsi sebagai anduh untuk menghadkan pergerakan berlebihan pergelangan tangan dan mengurangkan ketidakselesaan.</p>
	<p>Struktur Kekunci Ibu Jari</p> <p>Mengekalkan kedudukan yang betul sokongan sambil membolehkan pergerakan bebas ibu jari.</p>
	<p>Struktur Penambat</p> <p>Pergelangan atas dan bawah tanpa kelim mengelakkan sokongan dari tergelincir dan menstabilkan struktur pita.</p>

INDIKASI

Digunakan untuk ketidakselesaan sendi setiap hari.

MANUAL ARAHAN

1. Geser tangan anda ke dalam pemegang pergelangan tangan dengan bahagian bawah "V" menunjuk ke arah jari dan ibu jari yang menonjol dari lubang ibu jari (kedudukan yang sama untuk tangan kiri atau kanan).
 2. Licin pendakap yang itu dan memastikan bahawa struktur mesh dikait lurus dan berpusat di bahagian atas dan bawah pergelangan tangan. Jangan meregangkannya terlalu panjang kerana ia mungkin menekan pangkal ibu jari anda.
 - Sentiasa memakai sokongan terus pada kulit.
 - Jika sokongan tidak diletakkan dengan betul, ia mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan.
- * Keberkesanan yang diperoleh dengan memakai sokongan mungkin berbeza antara individu.

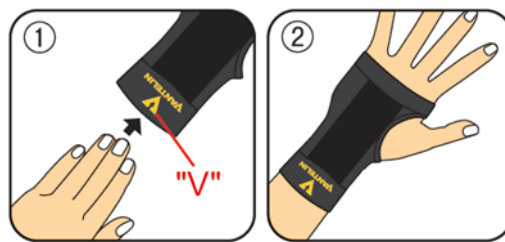

AMARAN

- Jangan guna sekiranya anda mempunyai: (1) keabnormalan termasuk bengkak dan mengalami kesakitan yang kuat disebabkan terseliah, patah tulang, atau kecederaan ligamen dan lain-lain., (2) atau mungkin mengalami gangguan vaskular perifer (3) keabnormalan seperti kecederaan, bengkak, ruam pada bahagian di mana sokongan harus dipakai, atau (4) dermatitis kronik / alergi terhadap tekstil kimia atau getah. Sekiranya anda mengalami simptom seperti ruam / kemerahan, gatal, letusan, kongesti, kesakitan yang luar biasa, atau bengkak, sila berhenti menggunakan penyokong dengan segera dan runding dengan pakar kesihatan profesional anda.
- Gunakan hanya seperti yang diarahkan.
- Gunakan saiz yang betul.
- Jangan gunakan ketika tidur.

ARAHAN PENJAGAAN (MENGGUNAKAN BERSIH PAKAIAN)

1. Basuh memisahkan di bawah 30°C.
2. Jangan peluntur.
3. Jangan keringkan menggunakan mesin basuh.
4. Menggantung dan udara kering. Mengelakkan cahaya matahari langsung.
5. Besi pada suhu rendah. Jangan menyeterika dengan stim.
6. Tidak kering bersih.

LANGKAH WASPADA BERKAITAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN

1. Jangan letak produk berdekatan dengan api dan haba.
2. Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
3. Terdapat risiko produk terkoyak apabila memakai secara salah atau mengenakan daya yang kuat ke atasnya.

PEMBUNGKUSAN

Kotak 1 unit.

PEMILIK PRODUK

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Jepun

DIBUAT OLEH

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Jepun