


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐAI BẢO VỆ LƯNG VANTELIN
VANTELIN SUPPORT BACK

HƯỚNG DẪN CHỌN CỖ

M : 26-34 in/65-85 cm

L : 32-39 in/80-100 cm

XL : 37-45 in/95-115 cm

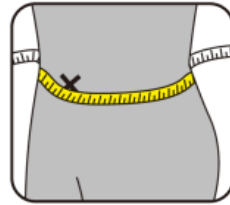

Đo vòng eo tại vị trí rốn như hình vẽ. Nếu có 2 cỡ phù hợp thì chọn cỡ lớn hơn

ĐẶC TÍNH

	<p>Hạn chế cong người về phía sau</p> <p>Băng quấn với cấu trúc lưới chéo bao phủ phần lớn vùng lưng dưới. Nó hạn chế các chuyển động tiến lùi và sự cong người quá mức có thể gây đau.</p>
	<p>Giúp cải thiện tư thế</p> <p>Đai được thiết kế theo nguyên lý công thái học giữ cố định vùng bụng dưới và lưng dưới để thiết lập một tư thế tốt cho sức khỏe.</p>
	<p>Tăng cường khả năng hít thở</p> <p>Sử dụng vải mỏng thoáng khí để sự thông hơi tốt hơn giúp bạn luôn cảm thấy mát mẻ và khô ráo.</p>

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng hàng ngày khi bị đau hay khó chịu ở vùng lưng dưới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Đeo đai bên ngoài lớp quần áo lót.

1. Cầm đai sao cho phần thẻ tag nằm ở phía trong bên phải (mũi tên hướng lên trên), và kéo bằng hai tay sao cho chiều dài hai đầu đai cân bằng nhau.
2. Kéo đầu đai bên trái chéo xuống dưới (theo hướng dẫn là dưới rốn khoảng 5 cm hay 2 in). * Không đeo đai phía trên rốn.
3. Cố định phần đầu đai bên trái và kéo đầu đai bên phải chéo xuống để dán hai đầu đai.



CẢNH BÁO

- Không sử dụng trong trường hợp: (1) có các bất thường như sưng và đau mạnh ở vùng bị thương, bao gồm cả các vết bầm tím và gãy xương, (2) rối loạn mạch máu ngoại biên, (3) các trường hợp bất thường như bị thương, sưng, nổi đỏ ở vị trí đeo đai hoặc (4) viêm da mãn tính/dị ứng với sợi hóa học hoặc cao su. Nếu bạn có biểu hiện phát ban / mẩn đỏ, ngứa, nổi mụn, xung huyết, đau bất thường, hoặc sưng tấy, dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tham vấn ý kiến chuyên môn của nhân viên y tế.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bạn có hoặc nghi ngờ có thai.
- Sử dụng đúng kích cỡ.
- Không đeo đai khi ngủ.
- Không siết đai quá chặt.
- Không đeo đai quá lâu.
- Thận trọng khi sử dụng vì quần áo có thể bị hỏng do siết hai đầu đai.
- Tránh làm xước da do móng tay hoặc kéo mạnh.

* Nếu đai không được đeo đúng vị trí, nó có thể không mang lại tác dụng như dự kiến.

* Hiệu quả thu được từ việc đeo đai hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng

HƯỚNG DẪN VỆ SINH SẢN PHẨM (Dán hai đầu dây đai trước khi giặt sản phẩm)

1. Giặt riêng ở nhiệt độ dưới 40°C. Không được vắt.
2. Không tẩy trắng.
3. Không sấy khô.
4. Treo và để khô tự nhiên. Tránh ánh nắng trực tiếp.
5. Không được ủi.
6. Không được giặt khô.
7. Giặt ướt đúng cách.

LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM

1. Không để sản phẩm gần nguồn lửa và nguồn nhiệt.
2. Để xa tầm tay trẻ em.
3. Dán hai đầu đai khi không sử dụng để tránh bị dính xơ vải hoặc những thứ tương tự.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 cái

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM

KOWA COMPANY, LTD.

4-14, 3-chome, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8433, Nhật Bản

NHÀ SẢN XUẤT

D-M CHAIN Cooperative

Osaki Factory

6-460-1 Osaki, Kahoku-shi, Ishikawa

929-1127, Nhật Bản

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BẢO HÀNH

Tên cơ sở: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3812 5848