


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐAI BẢO VỆ CỔ TAY VANTELIN
VANTELIN SUPPORT WRIST

HƯỚNG DẪN CHỌN CỖ

S: 5,5-6 in / 13-15 cm

M: 6-6,5 in / 15-17 cm

L: 6,5-7,5 in / 17-19 cm

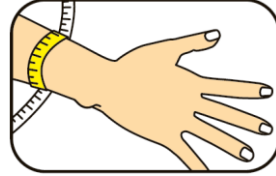

Đo xung quanh cánh tay ở vị trí khoảng 7 cm (hay 3 in) phía trên cổ tay. Nếu có hai cỡ phù hợp thì chọn cỡ lớn hơn.

ĐẶC TÍNH


	<p>Cấu trúc quần kiểu bánh mì kẹp</p> <p>Cấu trúc quần kiểu bánh mì kẹp ở mặt trước và sau của cổ tay hoạt động như một cái nẹp để hạn chế các vận động cổ tay quá mức và làm giảm sự khó chịu của cổ tay.</p>
	<p>Cấu trúc khóa ngón cái</p> <p>Giữ sản phẩm ở đúng vị trí đồng thời cho phép ngón cái cử động dễ dàng.</p>
	<p>Cấu trúc bím chặt</p> <p>Bo trên và dưới liền mạch để ngăn sản phẩm bị trượt và ổn định cấu trúc quần.</p>

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng hàng ngày khi bị đau hay khó chịu ở khớp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Luồn bàn tay vào sản phẩm sao cho phần đáy chữ “V” hướng về phía các ngón tay và ngón tay cái nhô ra ngoài lỗ ngón cái.
 2. Vuốt lại đai và đảm bảo cấu trúc lưới dệt kim nằm thẳng và ở chính giữa đầu trên và dưới của cổ tay. Không kéo đai dẫn quá vì có thể sẽ làm căng phần ngón tay cái phía sau.
 - Luôn đeo đai trực tiếp lên da.
 - Nếu đai không được đeo đúng vị trí, nó có thể không mang lại tác dụng như dự kiến.
- * Hiệu quả thu được từ việc đeo đai hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng.

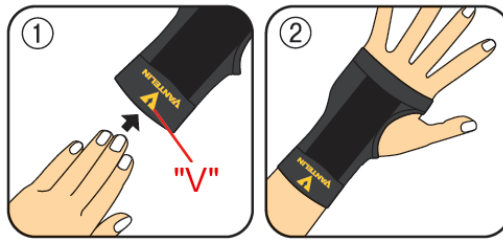

CẢNH BÁO

- Không sử dụng trong trường hợp: (1) có các bất thường bao gồm sưng, đau mạnh do bong gân, gãy xương, chấn thương dây chằng, v.v... (2) rối loạn mạch máu ngoại biên, (3) các trường hợp bất thường như bị thương, sưng tấy, nổi đỏ tại vị trí đeo đai, hoặc (4) viêm da mãn tính/dị ứng với sợi hóa học hoặc cao su. Nếu bạn có biểu hiện phát ban / mẩn đỏ, ngứa, nổi mụn, xung huyết, đau bất thường, hoặc sưng tấy, dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tham vấn ý kiến chuyên môn của nhân viên y tế.
- Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
- Dùng đúng kích cỡ.
- Không đeo đai khi ngủ.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH THIẾT BỊ (Sử dụng túi giặt)

1. Giặt riêng ở nhiệt độ 30°C.
2. Không tẩy trắng.
3. Không sấy khô.
4. Treo và để khô tự nhiên. Tránh ánh nắng trực tiếp.
5. Ủ ở nhiệt độ thấp. Không ủi hơi nước.
6. Không giặt khô.

LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM

1. Không để sản phẩm gần nguồn lửa và nguồn nhiệt.
2. Để xa tầm tay trẻ em.
3. Sản phẩm có thể bị rách nếu đeo không đúng cách hay tác động lực mạnh lên các phần của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 cái

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, NHẬT BẢN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN 849-0501 NHẬT BẢN

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BẢO HÀNH

Tên cơ sở: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty TNHH DKSH Việt Nam, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách mạng Tháng tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3812 5848

